

Mit ZORBAX SB-Aq getrennte organische Säuren


Säule: ZORBAX SB-Aq
883975-914
4,6 x 150 mm, 5 µm

Mobile Phase: 99 % 20 mM NaH₂PO₄, pH 2, 1 % ACN

Flussrate: 1,0 mL/min

Temperatur: 35 °C

Detektor: UV, 210 nm

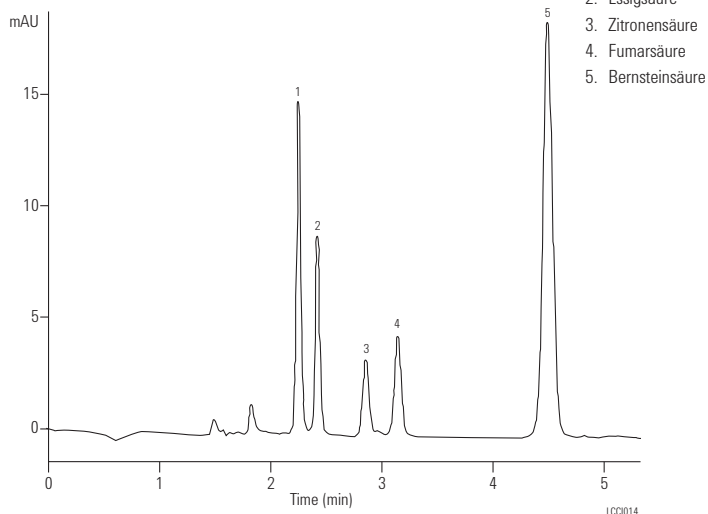

Brij 35

Säule: PLRP-S 100Å
PL1111-3500
4,6 x 150 mm, 5 µm

Mobile Phase: A: Wasser
B: ACN

Gradient: 0-100 % B in 40 min

Flussrate: 0,8 mL/min

Injektionsvolumen: 10 µL

Probenkonzentration: 1 mg/mL

Detektor: ELS (neb.= 50 °C, evap. = 70 °C, gas = 1,5 SLM)

